


# Korvantauskojeen käyttö ja huolto

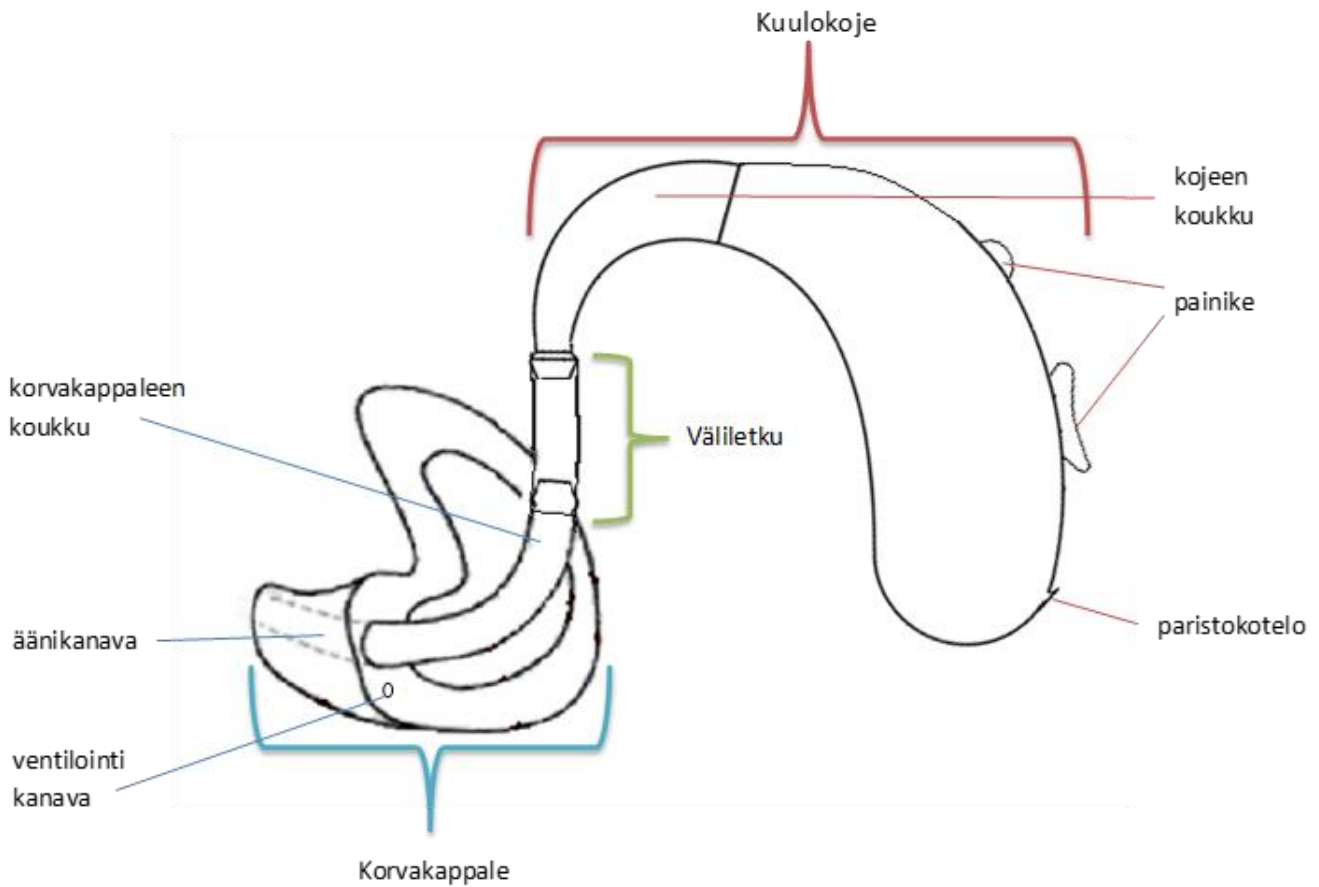

## Kuulokojeen käyttö ja huolto

Kuulokojeet on merkitty värikoodein: **PUNAINEN** = oikea korva **SININEN** = vasen korva

Kuulokojeen painikkeiden määrä vaihtelee kuulokojemallin mukaan. Painikkeella voi olla useita toimintoja, tai se ei ole käytössä. Tämä määräytyy kojeen ohjelmoinnin mukaan, mikä on merkitty kojeen ohjeisiin.

Paristokotelo toimii virtakytkimenä. Kun paristokotelo on kiinni, koje on päällä. Kun paristokotelo on auki, koje on pois päältä.

## Korvaan laitto

Tartu kiinni korvakappaleen koukusta peukalo-etusormiotteella, näin saat tukevan otteen (kuva 1). Vie korvakappale korvaasi ja nosta kuulokoje korvasi taakse (kuva 2).

Kuva 1.



Kuva 2.




### Pariston vaihto

Pariston kestoikä riippuu pariston koosta. Kuulokeskuksessa käytetään 312, 13 ja 675 paristolla toimivia kojeita. Pariston kesto on suunnilleen 1-2 viikkoa.

Poista uudesta paristosta suojateippi ja anna pariston ilmastoitua noin pari minuuttia. Laita paristo + puoli ylöspäin paristokoteloon.

### Väliletkun vaihto

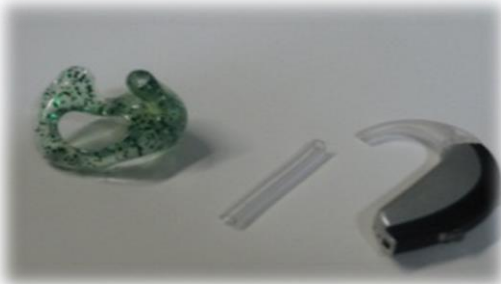


Korvakappale yhdistetään korvantauskojeeseen muovisen väliletkun avulla.

Väliletkun tulee olla pehmeä ja myötävä.

Väliletkun vaihtoväli on 1-2kk ja sen pituus mitataan entisen letkun mukaan.

### Korvakappaleen puhdistaminen

Korvakäytävä erittää vahaa, joka saattaa tukkia ääni- tai ventti aukon korvakappaleessa. Pyyhi korvakappale päivittäin tai pese tarvittaessa miedolla saippuavedellä. **Ennen pesua irrota korvakappale väliletkusta.** Huolehdi, että korvakappaleen äänikanava on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen takaisin väliletkuun.

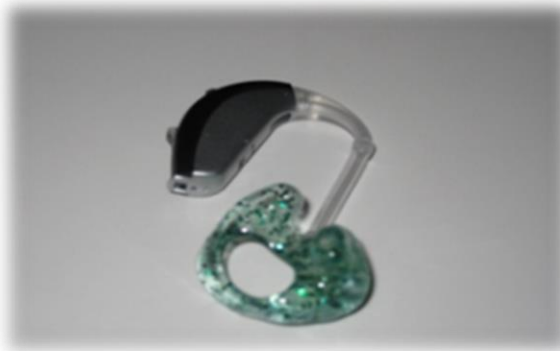

Pyyhi kuulokoje päivittäin pehmeällä kuivalla kankaalla puhtaaksi.

Kojetta ei saa jättää kovaan auringon paisteeseen, ei saa mennä saunaan, suihkuun eikä uimaan kuulokoje korvassa. Itse kuulokojetta ei saa koskaan pestä. Älä laita hiuslakkaa, hyttyssumutteita tai muita suihkutettavia aineita kuulokojeeseen ollessa korvassa. Magneettitutkimuksiin kuulokoje on otettava pois.

### Kojeiden huoltovideot

Linkki video-ohjeisiin löytyy kuulokeskuksen nettisivulta:

[www.hyvaks.fi/asiointi/kuulokeskus](http://www.hyvaks.fi/asiointi/kuulokeskus)

## Puhelimen kuuntelu

Nosta puhelin kuulokojeen yläpuolelle kuulokojeen päälle. Puhelimen ääni kuuluu kuulokojeen mikrofonin avulla korvaan. Etsi asento, missä kuuluvuus on parhain.



## Induktiivinen kuuntelu

Jos kuulokojeeseesi on ohjelmoitu induktiosilmukkaohjelma, voit hyödyntää sitä niissä paikoissa, joihin on induktiosilmukka asennettu esim. kirkot, teatterit ym.

Vahvistin ilmaistaan näissä tiloissa T-merkillä:



kuva: Kuuloliito Ry

## Vianetsintä

Jos alla mainittujen toimenpiteiden jälkeen koje ei toimi, sitä voi lähettää kuulokeskukseen huoltoon. Pakkaa huolellisesti ja laita mukaan yhteystietosi sekä mikä kojeessa on vikana. Vika ilmoituskaavake voi tulostaa kuulokeskuksen nettisivulla olevasta linkistä.

## Koje mykkä

- Paristokotelo auki -> sulje paristokotelo
- Paristo tyhjä -> vaihda uuteen
- Korvakappale tukossa -> puhdista korvakappale

## Ääni hiljainen

- Voimakkuudensäädin liian pienellä -> suurena voimakkuutta
- Korvakappale lähes tukossa -> puhdista
- Kuulo heikentynyt -> yhteys kuulokeskukseen
- Korvakäytävässä vahaa -> puhdistus esim. terveyskeskuksessa

## Koje vinkuu

- Koje huonosti korvassa -> laita uudestaan
- Korvakappale väljä -> yhteys kuulokeskukseen
- Murtuma väliletkussa -> vaihda uuteen
- Murtuma koukussa -> yhteys kuulokeskukseen
- Väliletku kovettunut -> vaihda uuteen
- Korvakäytävässä vahaa -> puhdistus esim. terveyskeskuksessa

## Ääni katkoo/ ääni säröytyy

- Heikko paristo -> tarkista/vaihda uuteen
- Kuulokoje rikki -> yhteys kuulokeskukseen

## Yhteystiedot

Kuulokeskuksen puh. (014) 269 1322

Soittoaika (takaisinsoitto): Ma - Pe klo 8:00 – 14:00

Kuulokeskuksen nettisivulta voit ottaa yhteyttä myös chatin kautta kirjoittamalla. Chat on avoinna arkisin klo 9-11 ja 12-14.

## Ajanvaraus ja jonotiedustelut

puh. (014) 269 1822

Ma-Pe klo 8:00-14:00

## Osoite

NOVA apuvälinepalvelupiste

Sairaala NOVA

Hoitajantie 3

40620 JYVÄSKYLÄ