


RITE-kojeen käyttöohje

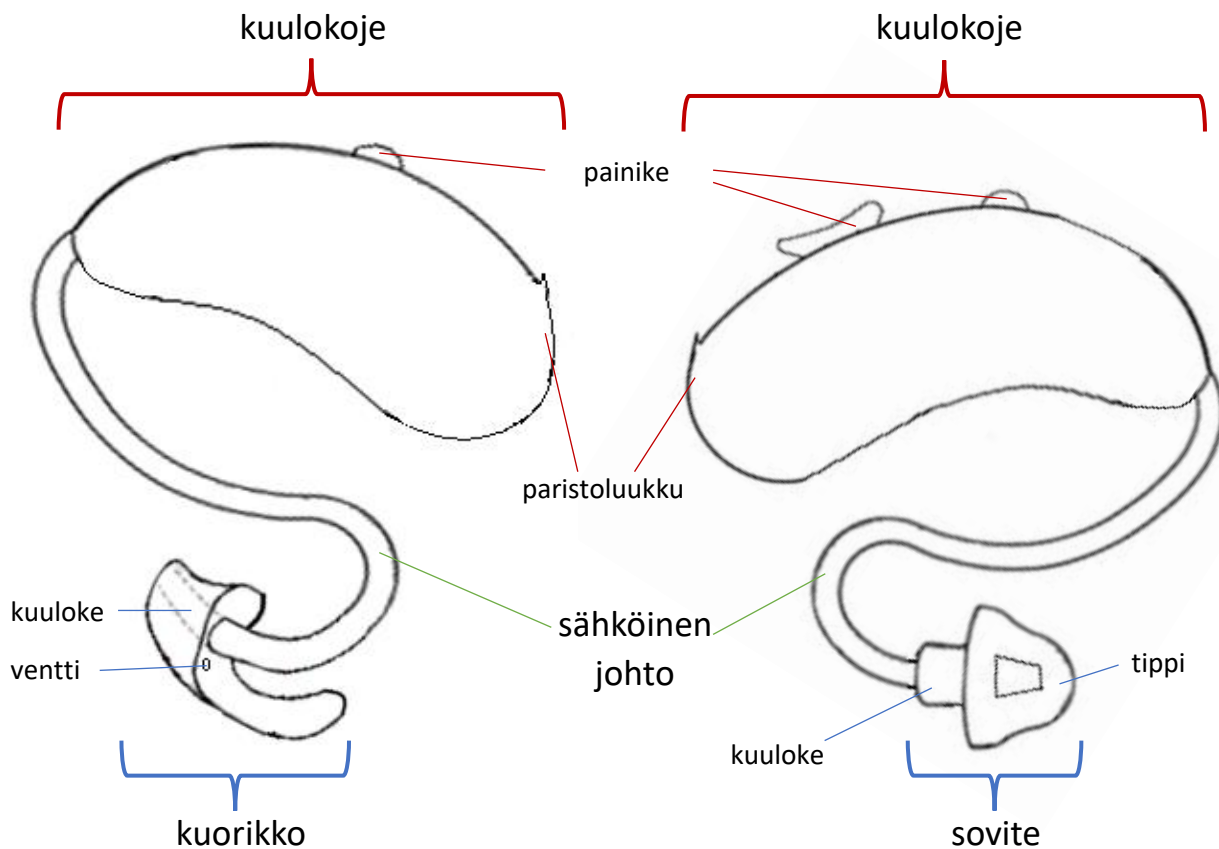

RITE-kojeen käyttö ja huolto

Kuulokojeet on merkitty värikoodein: **PUNAINEN** = oikea korva **SININEN** = vasen korva

Kuulokojeen painikkeiden määrä vaihtelee kuulokojemallin mukaan. Painikkeella voi olla useita toimintoja, tai se ei ole käytössä. Tämä määräytyy kojeen ohjelmoinnin mukaan, mikä on merkitty kojeen ohjeisiin.

Paristokotelo toimii virtakytkimenä. Kun paristokotelo on kiinni, koje on päällä. Kun paristokotelo on auki, koje on pois päältä.

Pariston vaihto

Pariston kestoikä riippuu pariston koosta. RITE-kuulokojeissa käytetään 312 tai 13 paristoja. Pariston kesto on suunnilleen 1-2 viikkoa.

Poista uudesta paristosta suojaetippi ja anna pariston ilmastoitua noin pari minuuttia. Laita paristo + puoli ylöspäin paristokoteloon.

Korvaan laitto

Aseta kuulokoje korvasi taakse ja ota kuulokejohto peukalosi ja etusormesi väliin. Aseta sovite / kuorikko tarpeeksi syväälle korvakäytävään.




Rite – kojeen hoito

Pyyhi kuulokoje päivittäin pehmeällä kuivalla kankaalla puhtaaksi.

Kuulokeosa: tippi tai kuorikko pyyhitään päivittäin kuivalla liinalla.

Silikoni tippi vaihdetaan uuteen, kun se vaatii puhdistusta (noin 1-3kk:n välein).

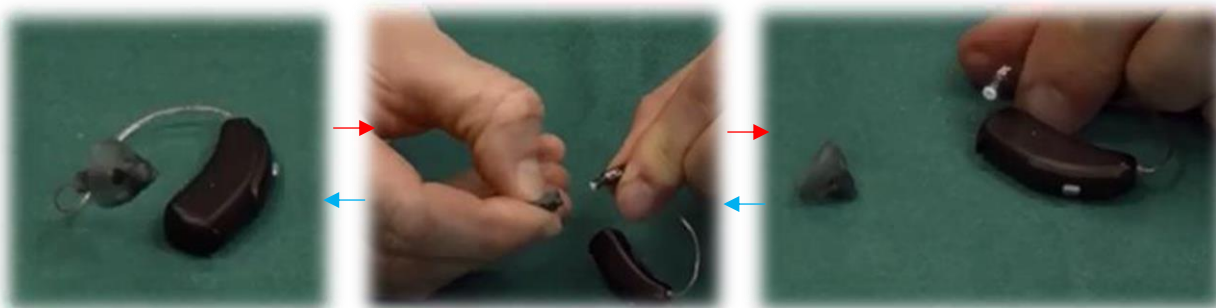

Kojeessa olevan vahasuojan kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. Vahasuojan voi varovasti harjata puhtaaksi vaikusta. Vahasuoja tulee vaihtaa uuteen 3 kuukauden välein ja tarvittaessa useammin. Vahasuojan nimi ja vaihto-ohje on merkitty kojeen ohjeisiin.

Kuulokejohto on vaihdettava uuteen, mikäli johtoon tulee värimuutoksia, taittumia tai säröjä. Kuulokejohdon vaihtamiseksi ota yhteyttä kuuloasemaan.

Kojetta ei saa jättää kovaan auringon paisteeseen, ei saa mennä saunaan, suihkuun eikä uimaan kuulokoje korvassa. Itse kuulokojetta ei saa koskaan pestä. Älä laita hiuslakkaa, hyttyssumutteita tai muita suihkutettavia aineita kuulokojeen ollessa korvassa. Magneettitutkimuksiin kuulokoje on otettava pois.

Kojeiden huoltovideot

Linkki video-ohjeisiin löytyy kuulokeskuksen nettisivulta:

www.hyvaks.fi/asiointi/kuulokeskus

Puhelimen kuuntelu

Nosta puhelin kuulokojeen yläpuolelle kuulokojeen päälle. Puhelimen ääni kuuluu kuulokojeen mikrofonin avulla korvaan. Etsi asento, missä kuuluvuus on parhain.



Monissa kojeissa onnistuu nykyään myös suoratoisto.

Induktiivinen kuuntelu

Jos kuulokojeeseesi on ohjelmoitu induktiosilmukkaohjelma, voit hyödyntää sitä niissä paikoissa, joihin on induktiosilmukka asennettu esim. kirkot, teatterit ym.

Vahvistin ilmaistaan näissä tiloissa T-merkillä:



kuva: Kuuloliito Ry

Vianetsintä

Jos alla mainittujen toimenpiteiden jälkeen koje ei toimi, sitä voi lähettää kuulokeskukseen huoltoon. Pakkaa huolellisesti ja laita mukaan yhteystietosi sekä mikä kojeessa on vikana. Vika ilmoituskaavake voi tulostaa kuulokeskuksen nettisivulla olevasta linkistä.

Koje mykkä

- Paristokotelo auki -> sulje paristokotelo
- Paristo tyhjä -> vaihda uuteen
- Korvakappale tukossa -> puhdista korvakappale
- Vahasuoja tukossa -> vaihda vahasuoja

Ääni hiljainen

- Voimakkuudensäädin liian pienellä -> suurena voimakkuutta
- Korvakappale, tippi tai vahasuoja lähes tukossa -> puhdista
- Kuulo heikentynyt -> yhteys kuulokeskukseen
- Korvakäytävässä vahaa -> puhdistus esim. terveyskeskuksessa

Koje vinkuu

- Koje huonosti korvassa -> laita uudestaan
- korvakappale väljä -> yhteys kuulokeskukseen
- korvakäytävässä vahaa -> puhdistus esim. terveyskeskuksessa

Ääni katkoo/ ääni säröytyy

- Heikko paristo -> tarkista/vaihda uuteen
- Kuulokoje rikki -> yhteys kuulokeskukseen

Yhteystiedot

Kuulokeskuksen puh. (014) 269 1322

Soittoaika (takaisinsoitto): Ma - Pe klo 8:00 – 14:00

Ajanvaraus ja jonotiedustelut

puh. (014) 269 1822

Ma-Pe klo 8:00-14:00

Osoite

NOVA apuvälinepalvelupiste

Sairaala NOVA

Hoitajantie 3

40620 JYVÄSKYLÄ