

ОБСЛУЖИВАНИЕ КИСЛОРОДНОГО КОНЦЕНТРАТОРА


Выключите кислородный концентратор на время обслуживания.

Раз в неделю:

- протрите поверхности прибора чуть влажной салфеткой
 - промойте водой и средством для мытья посуды находящийся на задней стенке прибора фильтр для очистки воздуха, сполосните его и оставьте сушиться
 - установите в прибор новый сухой фильтр
- заменяйте назальные канюли раз в две недели
- заменяйте длинную кислородную трубку и штуцер раз в пол года

Пример настройки скорости потока кислорода на 2 л/мин

Кислородный концентратор заменяют на новый раз в год во время контрольного осмотра.

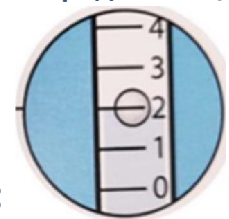

Если кислородный концентратор подает сигнал тревоги:

Убедитесь, что

- вилка шнура питания до конца вставлена в розетку
- скорость потока кислорода установлена на необходимое значение
- кислородные трубки не перегнулись

Выключите прибор, подождите 5 минут и включите снова. Если кислородный концентратор продолжает подавать сигнал, обратитесь в пульмонологическое отделение, а в дежурное время - в стационар отделения внутренних болезней.

Контактная информация:

Пульмонологическое отделение 014 269 2353 (в часы работы)

Стационар отделения внутренних болезней 014 269 1011 (только в дежурное время)